

クリオ解凍 アップグレード

※東京都立墨東病院との共同開発

付属の"クリオ解凍パッド"にクリオ製剤を収納して解凍（所要時間約10分，最大4本）
CRYOSEAL®SYSTEM（旭化成メディカル）解凍実績あり（所要時間25分，最大4組）



クリオ解凍パッドが2組付属




クリオ製剤



CRYOSEAL シリンジ

温度バリデーション 対応

標準温度計（デジタル式，棒状）で温度バリデーションが可能

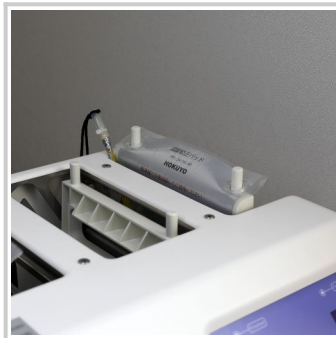

クリオ解凍パッドをプリヒートしたのち温度計を差し込んで測定できます

リモート解凍コール アップグレード

離れた場所で解凍終了を受信



受信機（電波到達距離 40m）



送信機（解凍器と接続）

※ CRYOSEAL® は旭化成メディカル株式会社の登録商標です
※ 各アップグレードは新規購入時でもご購入後でも実装可能です

文献等

日本輸血細胞治療学会誌 Vol.70 No.2 329-329, O-81 「乾式解凍によるクリオプレシペート融解への取り組み」